



Bacoban® DL 3% - Desinfección con un efecto sostenido

(Usado junto con un vaporizador: programado hasta 10 días) Probado según las especificaciones estándar de ASTM E 2180

Eficacia microbiológica

DIN EN 1040	5 min.
DIN EN 1275	5 min.
DIN EN 1276	5 min.
DIN EN 1650	5 min.
DIN EN 13697	5 min.
DIN EN 14476: 2005 Adenovirus 2%	240 min.
DIN EN 14476: 2005 Rotavirus 0,1%	5 min.
DIN EN 14476: 2007-2 Norovirus 2%	240 min.

Bacoban® DL 3% es

eficaz contra:

Bacterias, ciertos virus (virus de la hepatitis B y C, virus de la influenza que incluyen H5N1 y H1N1, **coronavirus**, rotavirus, adenovirus y norovirus, así como hongos)

Composición:

100 g de solución contiene: cloruro de benzalconio 0,78 g, piritiona de sodio 0,075 g, policondensados, fragancias, agua purificada

Finalidad prevista:

Solución desinfectante lista para usar para usar en combinación con un nebulizador Adexano con efecto antimicrobiano a largo plazo. Sin formaldehído, sin fenol

Eficacia y aplicación:

Probado según la directriz DGHM (Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología) (alta carga orgánica) 1.0%, 5 min.; 0,75%, 15 min.

Probado según Directrices EN:

DIN EN 1040: 5 min., DIN EN 1275: 5 min.,
DIN EN 1276: 5 min., DIN EN 1650: 5 min.,
DIN EN 13697: 5 min.
DIN EN 14476: 2005 Adenovirus 2% 240 min.
DIN EN 14476: 2005 Rotavirus 0.1% 5 min.
DIN EN 14476: 2007-2 Norovirus 2% 240 min.

Probado según el reglamento DVG (Asociación Alemana para el Control de Enfermedades Virales):

Eficacia viricida limitada; 5 minutos.
Efecto antimicrobiano hasta por 5 días contra bacterias (Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, enterococcus faecalis ...), hongos (aspergillus niger, candida albicans), virus (VIH, hepatitis B y C, herpes, influenza, **coronavirus**, BVDV, H5N1). Probado según la prueba ASTM E2180 reconocida internacionalmente. Probado para biocompatibilidad según DIN EN ISO 10993-1.

Para usar solo en combinación con el nebulizador Adexano®:

Bacoban®DL 3% Quite la tapa de la botella y enrosque la botella con cuidado y firmemente a la rosca interior del accesorio difusor nebulizador Adexano®. Observe las instrucciones de funcionamiento incluidas en la entrega del nebulizador Adexano®.

Reglas de seguridad:

No permanezca en la misma habitación mientras se realiza la desinfección con el nebulizador Adexano. Mantenga cerradas las ventanas y puertas. No ingerir ni inhalar. Evite el contacto visual. Enjuague bien las áreas afectadas con agua después del contacto con los ojos o las membranas mucosas y comuníquese con su médico. Aléjate de los niños.

Se puede utilizar en todas las superficies. Le recomendamos que pruebe las superficies sensibles en un lugar poco visible con Bacoban®DL 3%. El producto debe conservarse únicamente en un recipiente cerrado. El contenedor solo puede enviarse para su reciclaje en estado completamente vacío.

No usar después de la fecha de caducidad. Elimine de manera adecuada, teniendo en cuenta las especificaciones locales y oficiales.

¡Importante! El efecto antimicrobiano a largo plazo de Bacoban® DL 3% no significa que deban descuidarse las medidas de desinfección necesarias para la contaminación visible y/o cuestionable.


Utilice desinfectantes de forma segura. Lea siempre la marca y la información del producto antes de su uso.

Nebulizar

Desinfección de superficies:

- fácil
- completar
- de confianza
- efecto sostenido

Nebulización
nebulización
humedad producida
produced

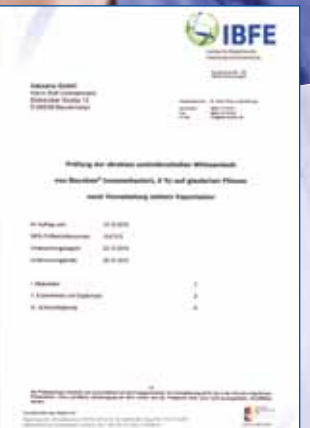

Probado para
eficacia y
confirmado

Ideal para:

Hospitales
Clínicas
Cirugías médicas
Laboratorios Ambulancias
Servicios de rescate
Residencias de ancianos
Centros de rehabilitación
Centros de talasoterapia
Saunas
Instalaciones de spa y baño

DISTRIBUIDOR

Nebulizar

El nebulizador Bacoban® utiliza una turbina de calentamiento e ionización para nebulizar el **Bacoban® DL 3%**, un desinfectante que se ha verificado que tiene eficacia a largo plazo.

Nebulización
seca; no se
produce humedad

El tamaño de partícula (5° en promedio) de esta base acuosa
La solución al 3% lista para usar precipita uniformemente en una niebla seca densamente reticulada en cada centímetro cuadrado de la habitación que se está tratando.

Debido a que no se produce humedad en este proceso, no es necesario quitar ningún objeto sensible del camino.

Extremadamente fácil de usar:

- Coloque el nebulizador, que pesa solo 5,8 kg, en la habitación a tratar.
- Simplemente atornille Bacoban DL 3% en la botella de 1000 ml en el accesorio
- Determine el volumen de la habitación a tratar (L x W x H),
- Establecer el volumen determinado con el interruptor de selección
- Presione el interruptor de encendido / apagado.
- Dejar la habitación
- El dispositivo se apaga automáticamente.

La aplicación consta de dos pasos:

- Nebulización
- Tiempo de contacto

(No es necesario limpiar las superficies)

Duración del tratamiento

El tratamiento preventivo de una habitación con las dimensiones: 4 m de largo, 5 m de ancho y 2,5 m de alto (50 m3) es por tanto:

- Nebulización = 9 minutos
- Tiempo de contacto = 30 minutos

• **Duración total por tratamiento = 39 minutos**

Desinfectante para nebulizador



**Use para detener:
bacterias - ciertos virus - hongos
integral y sostenible!**

Derivado de esto



Solución lista para usar de Bacoban® DL al 3%

Solución lista para usar para la desinfección y limpieza de aparatos médicos y otras superficies (según la Directiva 93/42 / CEE, MDD)
**Adecuado para
Nebulizador Bacoban®**

Bacoban® DL 3% desinfección y limpieza de superficies médicas según. y superficies de todo tipo en clínicas, consultorios médicos, centros de rehabilitación y residencias. Particularmente adecuado para su uso en áreas en las que se requiere una higiene eficiente y sostenida.

También especialmente indicado para zonas en las que se generan olores desagradables por microorganismos, como aseos e instalaciones sanitarias. Bacoban® DL 3% también se puede utilizar en áreas críticas y sensibles de las industrias farmacéutica y química.

¿Por qué es necesario un desinfectante de efecto sostenido?

El objetivo principal era producir un desinfectante de superficies con Bacoban® que no solo desinfectara, sino que también garantizaba un efecto sostenido hasta la siguiente desinfección.

Que este proyecto produjo un efecto sostenido que puede durar hasta 10 días, No solo nos sorprendió a nosotros, sino también a los laboratorios de pruebas independientes y a los institutos de salud que probaron Bacoban®.

La consecuencia de estos resultados únicos no es cambiar automáticamente todos los programas de higiene y solo desinfectar cada 5 a 10 días, sino utilizar esta gran ventaja para beneficiar a los

pacientes, personal y para mejorar el control de infecciones. Para integración en programas de desinfección establecidos
Un desinfectante como este proporciona una mayor seguridad contra la propagación de gérmenes y virus y, por lo tanto, ayuda a reducir las nuevas infecciones. ¡Cierra la brecha de higiene!

Y es por eso que se ha desarrollado Bacoban®: para garantizar una mayor seguridad entre los pasos de desinfección y para proporcionar al usuario un nuevo instrumento con el que luchar contra los gérmenes y virus.

Datos técnicos del nebulizador

- Peso: 5.8 kg
- Turbina de electricidad: 1,100 W
- Velocidad: 22,000 rpm
- Sin bomba de inyección de fluido
- Nebulización por efecto Venturi hasta 15 m del dispositivo
- Velocidad de salida de niebla: 80 m/s
- Apagado automático
- Comienzo demorado
- Cubierta autoextinguible
- 2 años de garantía
- Marcado CE para dispositivos médicos

0499 Fabricación acc. ISO 9001 / ISO 13485